

Sortimentsöversikt Ramper

Innehållsförteckning

Vikbar ramp	2
Portabel ramp Perfolight V20, vikbar 100–200 cm.....	2
Portabel ramp Perfolight E2, vikbar 106–212 cm (extra bred)	2
Teleskopisk och vikbar ramp	3
Portabel ramp Perfolight V30, teleskopisk och vikbar 116–285 cm	3
Portabel ramp Perfolight E3, teleskopisk och vikbar 106–300 cm (extra bred)	3
Vikbar ramp med hel åkyta	4
Ramp iRAMP 76x90 (utgående)	4
Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro, längd 935	5
VR20 Vikbar ramp (Anyramp) Utgående	6
Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro, längd 2085	7
Information vid förskrivning	8
Tröskelramper	9
Tröskelramp Quickramp	9
Tröskelramp Excellent	10
Tillbehör Tröskelramp Quickramp	11
Tillbehör Tröskelramp Excellent	11

Vikbar ramp

Portabel ramp Perfolight V20, vikbar 100–200 cm

Portabel ramp Perfolight E2, vikbar 106–212 cm (extra bred)



	V20	E2
Artikelnummer	22239	28247
Ansvar	KFR	
Förskrivare	AS	
Maxlängd	200 cm	212 cm
Invändig bredd	21 cm	26,5 cm
Vikt/st	6,25 kg	7,5 kg
Max belastning per par	300 kg	300 kg
Leverantör	Kvistberga Group AB	

Teleskopisk och vikbar ramp

Portabel ramp Perfolight V30, teleskopisk och vikbar 116–285 cm

Portabel ramp Perfolight E3, teleskopisk och vikbar 106–300 cm (extra bred)



	V30	E3
Artikelnummer	27486	28248
Ansvar	KFR	
Förskrivare	AS	
Längd	200–276 cm	212–295 cm
Invändig bredd	19,5 cm	25 cm
Längd ihopvikt	102 cm	102 cm
Vikt/st	8,4 kg	10,7 kg
Max belastning per par	250 kg	250 kg
Leverantör	Kvistberga Group AB	

Vikbar ramp med hel åkyta

Ramp iRAMP 76x90 (utgående)



Portabel lättviktsramp som är vikbar på längden.

Artikelnummer	41471
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	92 cm
Invändig bredd	76 cm
Bredd ihopvikt	39 cm
Vikt	6,5 kg
Maxbelastning	400 kg
Rek maxhöjd	18 cm

Leverantör [Feal AB](#)

Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro, längd 935



Portabel lättviktsramp som är vikbar på längden.

Artikelnummer	44675
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	93,5 cm
Invändig bredd	76 cm
Utvändig bredd	77,6 cm
Bredd ihopvikt	39,8 cm
Vikt	7,8 kg
Maxbelastning	350 kg
Rek maxhöjd	18 cm

Leverantör [Stepless/Guldmann Sverige AB](#)

VR20 Vikbar ramp (Anyramp) Utgående




Vikbar ramp med hel åkyta i sträckmetall. Den är tung och skrymmande vilket innebär att HMC:s chaufförer kan leverera och hämta hos brukare. Vi rekommenderar att två personer hjälps åt vid utplacering av denna ramp. OBS! Chaufförerna ansvarar ej för utplacering av rampen. Anyramp kommer i de flesta fall att bli liggande på samma ställe och eftersom den inte har någon fast förankring så är det av vikt att brukare eller anhörig kan se till så att rampen ligger tryggt på plats över tid.

Artikelnummer	39881
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	200 cm
Invändig bredd	82 cm
Längd ihopvikt	105 cm
Vikt	21 kg
Maxbelastning	400 kg

Leverantör [Feal AB](#)

Enkel vikbar ramp Easy Fold Pro, längd 2085

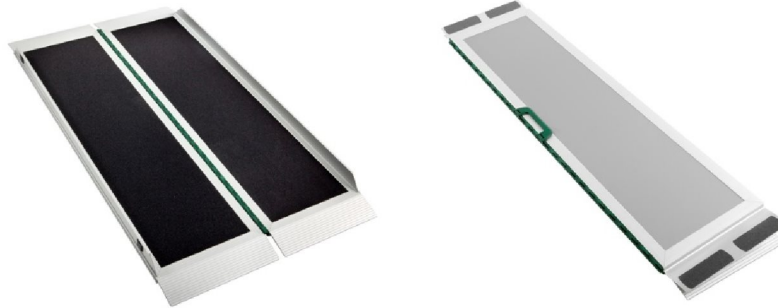

Vikbar aluminiumramp med hel åkyta. Den är skrymmande vilket innebär att HMC:s chaufförer kan leverera och hämta hos brukare. OBS! Chaufförerna ansvarar ej för utplacering av rampen.

Artikelnummer	44676
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	208,5 cm
Invändig bredd	76 cm
Utvändig bredd	77,6 cm
Bredd ihopvikt	39,8 cm
Vikt	15,8 kg
Maxbelastning	350 kg

Leverantör [Stepless/Guldmann Sverige AB](#)

Information vid förskrivning

Val av ramplängd

Självkörd manuell rullstol: maximal stigning 1:7.

Körd av medhjälpare eller elrullstol: maximal stigning 1:5

1:7:

Ramp 1 meter – 14 cm nivåskillnad

Ramp 2 meter – 29 cm nivåskillnad

Ramp 3 meter – 43 cm nivåskillnad

1:5:

Ramp 1 meter – 20 cm nivåskillnad

Ramp 2 meter – 40 cm nivåskillnad

Ramp 3 meter – 60 cm nivåskillnad (Ej att rekommendera med brukare i stol, riskabelt samt att vårdare får svårt att skjuta stolen uppför 2st portabla ramper)

Med tanke på säkerheten rekommenderar HMC att man inte sitter i eldriven rullstol och kör uppför eller nerför portabla ramper.

OBS! Vid förskrivning av skenor, tänk på att enheten är styck så registrera 2st ramper, 3st vid trehjulig elrullstolsmodell.

Tröskelramper

Tröskelramp Quickramp



Tröskelramp i mjuk plast. Ramperna är 100 cm breda och kan kapas med en mattniv (tillhandahålls inte av HMC). Finns i 7 olika höjder.

Rampen fästs mot golvet med dubbelhäftande tejp (se tillbehör). Vid situationer där rampen behöver lyftas bort kan monteringsplattor användas i stället för tejp

Artikelnummer	42246	Tröskelramp H 4 mm
	42245	Tröskelramp H 6 mm
	42247	Tröskelramp H 8 mm
	42241	Tröskelramp H 10 mm
	42238	Tröskelramp H 12 mm
	42239	Tröskelramp H 14 mm
	42244	Tröskelramp H 16 mm

Ansvar	KF
Förskrivare	AS
Leverantör	Kvistberga Group AB

Tröskelramp Excellent





Tröskelramp i hård plast. Ramperna är 75 cm breda och finns i 4 fasta höjder, 18mm, 20 mm, 37mm och 56mm. Det går att finjustera höjderna med hjälp av förhöjningsremsor i 2mm intervall upp till 16mm (se tillbehör) som trycks fast på undersidan av rampen. Till en tröskelramp behövs 3 st remsor, vilket medföljer varje tröskelramp vid beställning. Förhöjningsremsorna kan också beställas i 21 eller 75-pack.




Vid behov av bredare ramp än 75 cm så finns det en 25 cm breddningssats att montera på. Behöver rampen kapas så kan en fogsvans användas (vid behov kontakta sortimentsansvarig konsulent). Det finns även hörnmoduler att montera vid behov.

Rampen fästs mot golvet med 2 st monteringsplattor försedda med dubbelhäftande tejp (se tillbehör) [Se instruktionsfilmer](#)

Artikelnummer 42240	Tröskelramp h18-26 mm (1-lager), dj 137mm
42945	Tröskelramp h20-36 mm 1:12 (1-lager), dj 260 mm
42242	Tröskelramp h37-53 mm (2-lager), dj 260mm
42243	Tröskelramp h56-72 mm (3-lager), dj 385mm
42459	Breddning av 1-lager
42946	Breddning av 1-lager 1:12
42462	Breddning av 2-lager
42460	Breddning av 3-lager
42464	Hörnmodul till 1-lager
42947	Hörnmodul till 1-lager 1:12
42463	Hörnmodul till 2-lager
42461	Hörnmodul till 3-lager

Ansvar KF
Förskrivare AS
Leverantör [Kvistberga Group AB](#)

Tillbehör Tröskelramp Quickramp	
	
<p>42230 Quicktape 25st</p>	<p>42231 Monteringsplatta Qramp självhäftande 25st</p>

Tillbehör Tröskelramp Excellent	
	
<p>42235 Förhöjningsremsa 21-pack 42232 Förhöjningsremsa 75-pack</p>	<p>42233 Monteringsplatta Excellent självhäftande 25st</p>
	
<p>42458 Gummiproppar (friktionstassar) svarta 100st/fp</p>	

OBS! Samtliga tillbehör till Quickramp och Excellent beställs till Vårdenhet

Quickramp och Excellent ramperna är tillverkade av ett återvinningsbart material. Återsänd gärna det material som inte används, exempelvis ramper som ni inte avser att lämna ut igen, kapade rampbitar etc till HMC. Kvistberga tar hand om svinnet och tillverkar nya ramper av materialet.